
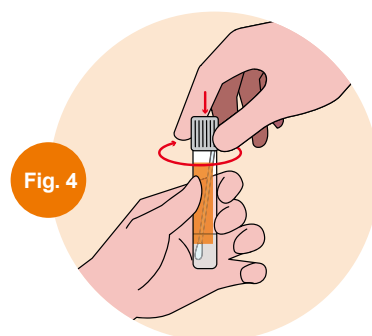
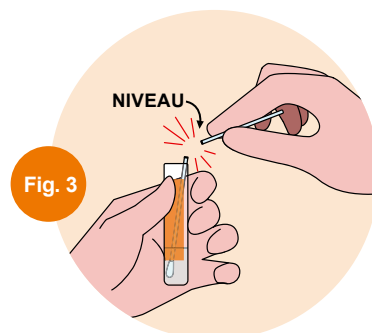
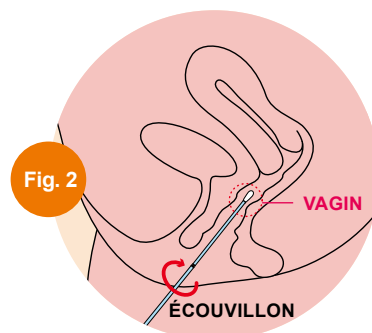


Protocole de prélèvement ou auto-prélèvement anal ou pharyngé ou vaginal pour recherche de *Chlamydia trachomatis* et *Neisseria gonorrhoeae* et/ou de *Mycoplasma Genitalium* avec le kit de collecte écouvillon multitest en milieu Aptima®

⚠ Précautions à prendre : se laver les mains avant de réaliser l'auto-prélèvement

- 1 Ouvrir partiellement le sachet contenant l'écouvillon. Ne pas toucher le coton et ne pas le laisser tomber. Si le coton est touché ou si l'écouvillon est tombé, demander un nouveau kit de prélèvement.
- 2 Enlever l'écouvillon du sachet.
- 3 Tenir l'écouvillon comme le montre la **figure 1**, en plaçant le pouce et l'index au milieu de la tige.
- 4 Introduire doucement l'écouvillon dans le vagin sur une distance d'environ 3 cm (**cf. figure 2**), et tourner doucement l'écouvillon pendant 10 à 30 secondes. S'assurer que l'écouvillon touche les parois du vagin pour que l'humidité soit absorbée par l'écouvillon.
- 5 Retirer l'écouvillon sans toucher la peau.
- 6 Tenir l'écouvillon tout en enlevant le bouchon du tube. L'écouvillon ne doit pas être posé pendant l'ouverture du tube. Veiller à ne pas renverser le contenu du tube. Si cela arrive, redemander un nouveau kit de prélèvement.
- 7 Placer immédiatement l'écouvillon dans le milieu de transport de façon à ce que le bout de l'écouvillon soit visible en dessous de l'étiquette.
- 8 Casser précautionneusement la tige au niveau indiqué en la pressant contre le bord du tube comme le montre la **figure 3**.
- 9 Resserrer fermement le bouchon sur le tube (**cf. figure 4**). Conserver le tube à température ambiante et le rapporter au laboratoire dans les meilleurs délais n'excédant pas les 48h.

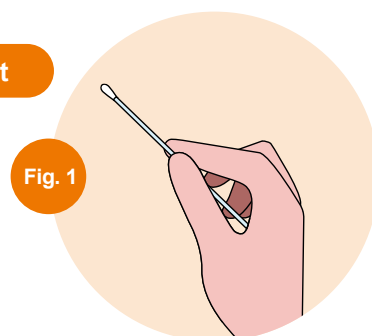

NOTA BENE

Pour les prélèvements anaux

Insérer délicatement l'écouvillon dans le rectum à environ 3 à 5 cm de profondeur et faire doucement tourner l'écouvillon pendant 5 à 10 secondes.

Pour les prélèvements pharyngés

Insérer délicatement l'écouvillon dans la bouche, en veillant à maintenir en contact avec les amygdales et le fond de la gorge, puis retirer l'écouvillon sans toucher l'intérieur des joues, ni de la langue.