


# Note d'information Coronavirus COVID-19 (SARS-COV-2)

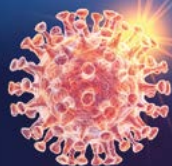

## LES MILIEUX DE TRANSPORT POSSIBLES

### POUR TRANSMETTRE LES ÉCHANTILLONS COVID-19

Le milieu de transport M4RT recommandé pour le transport des échantillons de Covid-19 connaît actuellement des ruptures de stock temporaires.

Pour palier à cette situation et pour vous permettre l'envoi rapide des échantillons voici une liste des milieux de transport conseillés :

- M4RT
- Improviral NAT medium
- UTM-RT
- Sigma VCM liquide Amies
- Transwab
- Deltaswab virus
- E-Swab
- Delatswab amies
- Xpert Viral Transport Medium
- BD UVT
- Sérum physiologique (si délai de transport < 24h)
- Kang Jian Virus preservation medium
- NEST Solution for swab sample collection, transportation and storage

## LES TRIPLES EMBALLAGES POSSIBLES

### POUR TRANSMETTRE LES ÉCHANTILLONS COVID-19

L'emballage recommandé est le triple emballage avec un sachet 95kPa avec buvard. En cas de rupture de stock temporaire du sachet 95kPa, il est possible de le remplacer par un sachet zippé avec absorbant, qui sera mis dans un second sachet zippé avec absorbant.

Voici les différentes solutions de triple emballage possibles :

1. L'écouvillon sera mis en **milieu de transport M4RT** (ou milieu de substitution, voir ci-dessus) en veillant à bien le refermer de façon étanche. L'extérieur du tube est **désinfecté** à l'aide des désinfectants habituels virucides (de type Anios)
2. Le tube M4RT contenant l'écouvillon est ensuite mis dans un **sachet plastique 95kPa avec buvard** (ou à défaut dans 2 sachets zippés avec absorbant)
3. Mettre ensuite le sachet 95kPa dans un sachet violet S14 à destination de Lyon (cf photo).

Mettre la **fiche de renseignements cliniques R55 "Covid-19 (SARS-CoV-2)"** dans la poche extérieure du sachet violet S14.



### Pour toute question, veuillez contacter nos secrétariats médicaux

- Pour les correspondants en **sachets jaunes Covid-19 - Secrétariat Médical d'Ivry** [secretariatmedical@eurofins-biomnis.com](mailto:secretariatmedical@eurofins-biomnis.com)
- Pour les correspondants en **sachets violets Covid-19 - Secrétariat Médical Infectiologie** [secretariat-infectiologie@eurofins-biomnis.com](mailto:secretariat-infectiologie@eurofins-biomnis.com)

